




扫码观看  
**ACT** 系统

国际专利产品

专利号: ZL 2022 3 0354416.9

**imt**  
a **TECNIPLAST** company

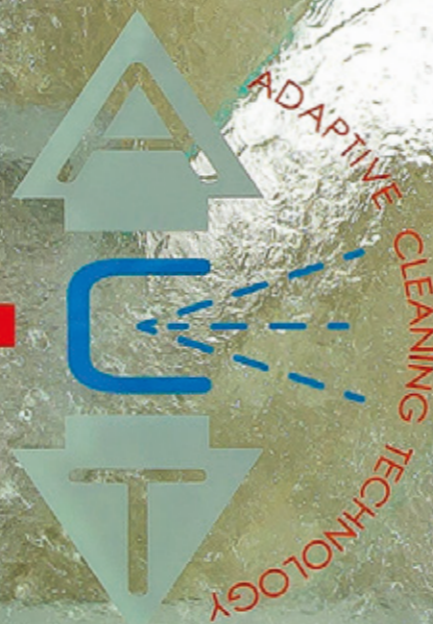

**ACT**



**TECNIPLAST**  
innovation through passion



泰尼百斯中国

电话: +86 2150810920 传真: +86 215081 0929  
地址: 上海市浦东新区东方路 69 号裕景商务广场 A 座 1908-1912 室  
邮编: 200120  
E-mail: info@tecniplast.cn  
网站: www.tecniplast.cn

**imt**



NEW

# RWA Alpha

重新定义运行效率和绿色节能

+75% 额外吞吐量/小时

-75% 运行能耗/笼盒




### 前所未有的优异性能

- ▶ 符合最新的AK-KAB认证和AAALAC相关要求
- ▶ 新型高密度清洗架：每循环清洗量可达**154**个小鼠IVC笼盒
- ▶ 每小时可完成**8**个经过AK-KAB认证的清洗验证循环，每小时小鼠IVC笼盒的清洗量超过**1232**个



### 行业首创的ACT“自适应”清洗技术

- ▶ 结合了独立的垂直移动和振荡摇摆的全新独特清洗臂设计
- ▶ 与传统的振荡摇摆臂技术相比，具有更好的清洗覆盖面
- ▶ 通过在待清洁物品的表面进行直接且均匀的高压水流覆盖，充分确保清洗效果
- ▶ 通过对清洗臂位置和运行轨迹的精准控制，实现对水瓶、笼架、金属笼具及后勤物流设备的“自适应”性清洗

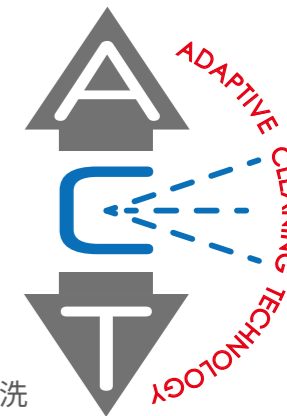


### 一以贯之的高效节能设计

- ▶ 更低的能耗，每个笼盒清洗耗水量仅需**330ml**
- ▶ 变频器作为标配，可以根据工作的实际负荷灵活调整电机运行情况，节能环保

### 极简的安装条件需求

- ▶ 地坑沉降深度仅需**10cm**
- ▶ 靠墙安装时，宽度要求仅需**2.5m**
- ▶ 设备蒸汽加热或电加热可选
- ▶ 蒸汽加热型号，仅需提供冷水即可运行

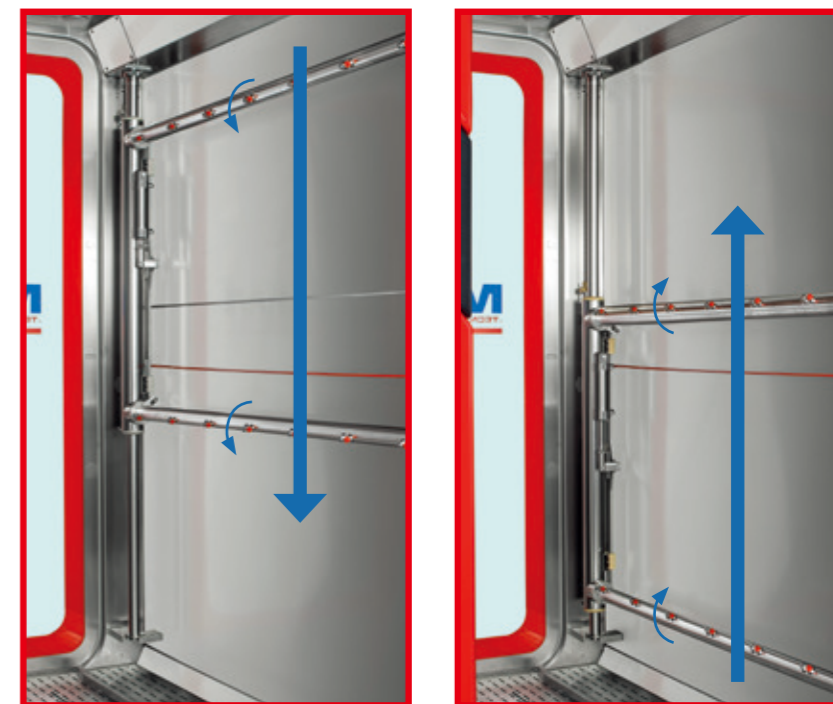

### 丰富的可拓展功能

- ▶ 过氧化氢传递舱一体化升级
- ▶ 满足碱-酸-中和清洗循环的高效切换
- ▶ 舱底自动倾斜系统，便于后勤物流设备平面沥水
- ▶ 热回收系统，可对清洗用水及干燥用空气进行预热
- ▶ 废水pH处理系统，可降低排污处理要求
- ▶ 内置式的清洗剂储存模块

# IT'S TIME TO ACT!