



移动 & 紧凑型  
更高操作灵活性!



**ARIA**

## 垫料倾倒机采用静音，紧凑型设计，安静运行的同时，更加安全和高效

DS One 垫料倾倒机符合人体工程学设计，保证低功耗运行的同时，提供绝佳的安全性，确保操作人员和工作环境免受过敏原的影响

### 性能


- 工作区域经过精心设计和优化，增强过敏原和污染物防护的同时，具有最大的灵活性，适配不同尺寸的笼具；
- ISO Coarse 预过滤器（ISO粗滤器≥70%，符合ISO 16890；EN779）与过滤器防护网采用一体注塑，更简单地清除较大的灰尘颗粒的同时，有效延长 HEPA 过滤器的使用寿命；
- 漏斗采用防滑设计，垃圾袋的移除时仍能持续保护操作员。

### 优势

- 机器采用紧凑型设计，符合人体工程学；入口宽敞，适配多种笼盒。可选配电动升降系统，满足不同用户需求；
- 设备表面采用高科技、高抗性塑料，具有良好的消毒剂抗性，容易清洁；
- EC电机配合独特的通风设计，节能的同时，确保较低的噪音水平；
- 工作台面采用耐久性塑料（聚合物）材质，耐化学消毒剂；
- 排气端可选配的碳过滤器能吸收氨等其它气体污染物。

### 基本配置

- AISI 304 采用 scotch brite 抛光处理，显著提高清洁度和使用寿命；
- 4.3 英寸触摸屏控制面板，自动调节系统确保进气速度恒定；
- LED 灯具有调节功能，能提供最高照明水平；
- EC 电机鼓风机确保更高的效率和优良的性能，同时具有较长寿命并减少维护

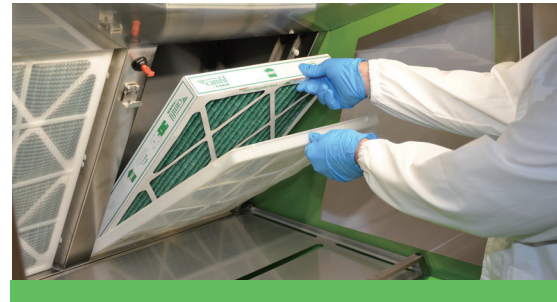

外部尺寸 (W x D x H)

1050 x 895 x 1880 mm

内部尺寸 (W x D x H)

966 x 660 x 590 mm

### 多种配件选择

- 60L 聚乙烯移动垃圾箱
- 105L 聚乙烯移动垃圾箱
- 不锈钢垃圾箱
- 排气端套管过渡
- 排气端碳包过滤器
- Tresa 架子



COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =

COMPANY WITH  
ENVIRONMENTAL SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 14001 =

**TECNIPLAST**  
innovation through passion

## 泰尼百斯中国

电话: +86 21 5081 0920 传真: +86 21 5081 0929

地址: 上海市浦东新区东方路69号裕景商务广场A座1908室

邮编: 200120

E-mail: info@tecniplast.cn

网站: www.tecniplast.cn

