




# NEW CRYSTAL LINE IVC

## 可选配件

- 微生物捕捉器
- 自动供水系统笼盒
- 不锈钢式食槽
- 丰富的动物福利配件

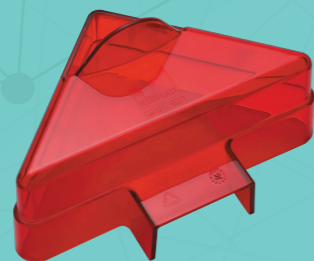

小鼠私密屋



微生物捕捉器

## 相关产品

如果您对如下相关产品感兴趣, 请与我们泰尼百斯中国联系以获取更多产品信息。




换笼工作台

- 设计紧凑轻巧, 符合人体工程学设计
- 双面工作台, 可灵活调节台面高度



步入式洗笼机

- 可验证的更佳清洗方案
- 超高吞吐量+高效设计
- 高度灵活, 操作简易
- 安全至上的节能设计理念

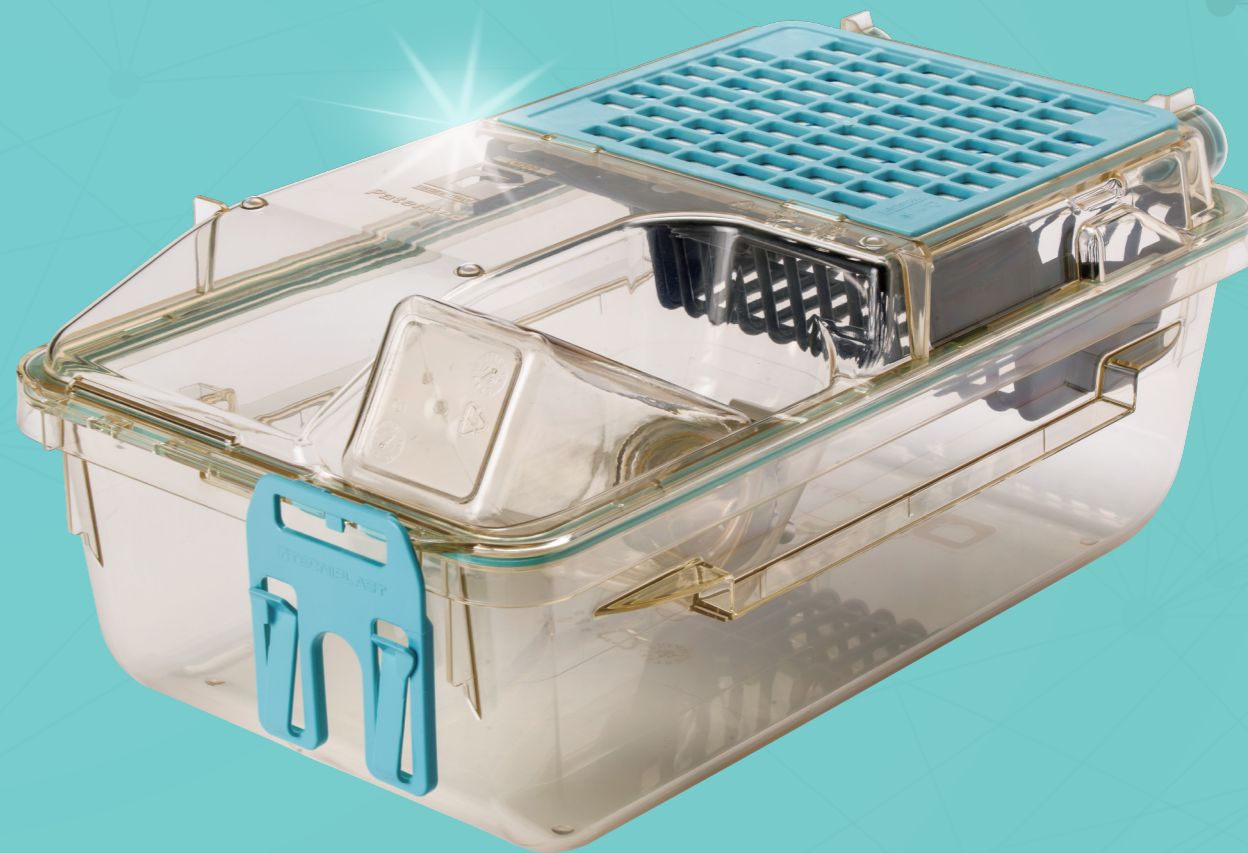

### 泰尼百斯中国

电话: +86 21 5081 0920 传真: +86 21 5081 0929  
 地址: 上海市浦东新区东方路69号裕景商务广场A座1908室  
 邮编: 200120  
 E-mail: info@tecniplast.cn  
 网站: www.tecniplast.cn




# CRYSTAL LINE IVC

NEW

## “多合一”笼架设计

- 兼顾操作员身高的人体工程学的笼架设计
- 十层笼架设计对于（女性）使用人员仍然十分友好
- 最高层与最底层都在适宜操作的高度

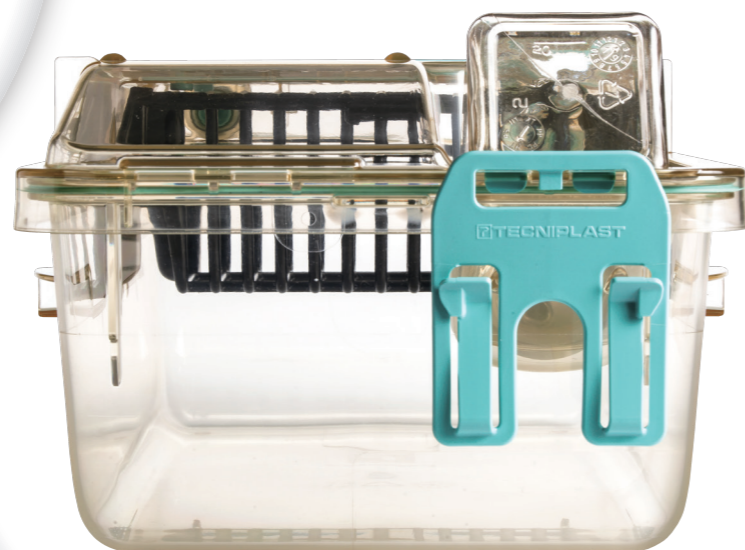

## “更清晰”笼盒设计

- 得益于食槽提升设计\*，不影响日常观察动物，检查食槽内的食量从未如此简单
- 侧置的水瓶，极大提高笼盒可视性
- 从正面或上方都能很容易地观察动物，无需取出笼盒，即可检查食物、饮水瓶余量等情况，减少对动物的刺激

### 规格参数：

CM500笼盒：

底面积：535 cm<sup>2</sup>

外部尺寸（WxDxH）：384 x 207 x 143（154\*） mm

\*带水瓶高度

材质：Polysulfone（PSU）：3年质保

专利保护笼底：嵌入式密封；对称式设计

食槽：提升式食槽设计（可选不锈钢材质）

食槽容积：0.5L

笼盖：

方形嵌盖式生命窗设计

自动定心水瓶凹槽

卡扣：笼盖上为无卡扣无搭扣设计

水瓶：260ml（瓶盖带密封圈）

笼盖顶部微生物滤膜：

细菌过滤有效性（BFE）≥99.9999937%

病毒过滤有效性（VFE）≥99.999987%



### Crystal line系列

笼架	配置	适用	整体规格 (长x宽x高) mm
CRM060XNOAWSE08FE	60 笼位 (6W x 10H) - 单面	小鼠	1350 x 500 x 1860 (1933*)
CRM070XNOAWSE08FE	70 笼位 (7W x 10H) - 单面	小鼠	1570 x 500 x 1860 (1933*)
CRM080XNOAWSE08FE	80 笼位 (8W x 10H) - 单面	小鼠	1790 x 500 x 1860 (1933*)
CRM120XNOAWSE08FE	120 笼位 (6W x 10H) - 双面	小鼠	1350 x 888 x 1860 (1947*)
CRM140XNOAWSE08FE	140 笼位 (7W x 10H) - 双面	小鼠	1570 x 888 x 1860 (1947*)
CRM160XNOAWSE08FE	160 笼位 (8W x 10H) - 双面	小鼠	1790 x 888 x 1860 (1947*)

\*带拆卸送气管