



ARIA

Ventilierter Schrank der Spitzenklasse

Der Tecniplast ARIA BIO-C36 EVO ist ein Ventilierter Schrank mit 1.0 m Breite zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen geeignet für fast alle Typen von Käfigen.

MERKMALE

- **Innovatives, energiesparendes Doppelventilationssystem** für wahlweisen Über- oder Unterdruckbetrieb
- **Mikroprozessor geregelte Luftwechselrate** mit automatischer Einstellung des Volumenstromes für sichere Arbeitsbedingungen
- **Zuluft- und Abluftfilter in HEPA H14 Effizienz (EN 1822) DOP** getestet.

VORTEILE

- **Flexibilität:** Überdruck (Bioexklusion) und Unterdruck (Biocontainment)
- **Reinigbarkeit:** Abluftkanäle und Einlegeböden sind einfach zu reinigen
- **Energieeffizienz und Geräuschpegel:** optimiertes Plenumdesign und EC-Motoren
- Optionale, innovative und dimmbare **LED Beleuchtung**, mit Tages/Wochen Timer, mit homogener Lichtverteilung auf jeder Ebene
- Optionales zuverlässiges **Heizsystem** mit gleichmäßiger und effizienter Hitzeverteilung.

STANDARD EIGENSCHFTEN

- **Benutzerfreundliches 7" TFT Touch Screen** mit integriertem Mikroprozessorsystem für einfache Bedienung
- **Doppelverglaste, getemperte, magnetische Sicherheitstüren** wahlweise in transparenter, roter oder undurchsichtiger Ausführung
- Kammerinnenraum in **Edelstahl 1.4031**
- **Höhenverstellbare Einlegeböden** (nur für Ausführung ohne Tag/Nacht Zyklus Funktion)
- Mit **CE** und **UL/CSA** Konformitätserklärung.




Abmessungen (BxTxH)

1000 x 810 x 1930 mm

Innenraum - ohne Einlegeböden (BXTXH)

940 x 680 x 1350 mm

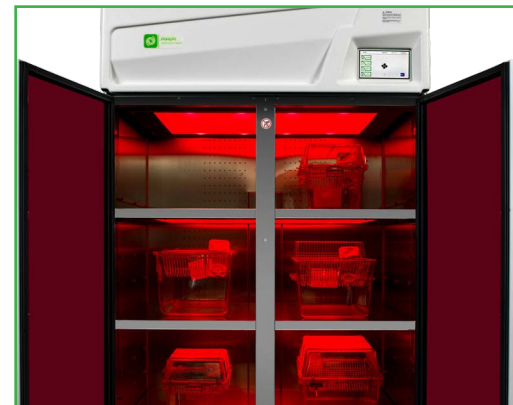

HEADQUARTERS

ITALY | Tel. +39 0332 809711 · www.tecniplast.it · E-mail: tecnicom@tecniplast.it; venditeitalia@tecniplast.it

SISTER COMPANIES

AUSTRALIA/NEW ZEALAND | Tel. + 61 2 8845 6500 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplast.com.au

CHINA | Tel. + 86 (0)21 50810920 · www.tecniplast.cn · E-mail: tecniplastchina@tecniplast.it

FRANCE | Tél. +33 (0)4 72 52 94 41 · www.tecniplast.fr · E-mail: info@tecniplast.fr

GERMANY | Tel. +49 (0)8805 921320 · www.tecniplast.de · E-mail: info@tecniplast.de

UNITED KINGDOM | Tel. + 44 (0)345 0504556 · www.tecniplastuk.com · E-mail: info@tecniplastuk.com

SWITZERLAND | Tel +41 (0)81 750 31 40 · www.tecniplast.ch · Email: info@tecniplast.ch

JAPAN | Tel. +81 (0)3 5770 5375 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplastjapan.co.jp

USA | Toll Free: +1 877.669.2243 · www.tecniplastusa.com · E-mail: info@tecniplastusa.com

CANADA | Toll Free: +1 855.347.8718 · www.tecniplastcanada.com · E-mail: info@tecniplastcanada.com

CAT 203/TED - Rev Oktober2021

Technische Änderungen vorbehalten.

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 14001 =

TECNIPLAST
innovation through passion