

**Mobile,
kompakte
Einstreuabwurfstation
mit großer
Frontöffnung!**

 **ARIA**
ALLERGEN CONTAINMENT



 **ARIA**

Kompakte und leise Einstreuabwurfstation, **sicher und effizient.**

EIGENSCHAFTEN


- **Optimaler Bedienschutz gegen Allergene und Kontaminationen**, dank des neu konstruierten Arbeitsraumes;
- **Verbesserte HEPA Filterlebensdauer** (ISO Grobstaubfilter $\geq 70\%$ nach ISO 16890; G4 nach EN779) mit Schutznetz für eine effiziente Abscheidung von Staubpartikeln;
- **Verschiebbarer Abwurfrichter** zum Verschließen der Müllbeutel unter besten Schutzbedingungen bei eingeschalteter Lüftung.

VORTEILE

- **Großer, ergonomischer Arbeitsbereich** mit großer Frontöffnung. Elektrisches Liftsystem zur Höhenverstellung optional erhältlich;
- **Einfache Reinigbarkeit** dank der speziell geformten Kunststoffoberflächen;
- **Energieeffizient und geräuscharm** durch spezielles Plenumdesign und EC Lüftermotoren;
- **Langlebige Oberflächen** im Arbeitsbereich. Extrem beständig gegen chemische Desinfektionsmittel;
- **Aktivkohlefilter** absorbiert Gerüche und gasförmige Kontaminationen wie Ammoniak.

STANDARD AUSSTATTUNG

- **Edelstahl 1.403 mit Scotch-Brite finishing** Oberfläche;
- **4.3" Touchscreen** mit automatischem Regelungssystem für konstanten Luftstrom;
- **LED Beleuchtung** dimmbar;
- Hocheffiziente und geräuscharme **EC Lüftermotoren**.

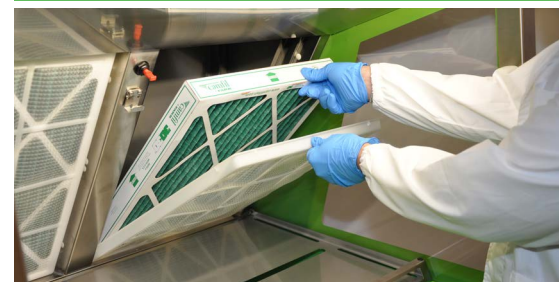

ABMESSUNGEN (BxTxH)
nicht höhenverstellbar:
 1050 x 895 x 1880 mm
mit elektrischem Liftsystem:
 1050 x 895 x 1880 / 2050 mm
ARBEITSBEREICH (BxTxH)
 966 x 660 x 590 mm

Optionen und Zubehör:

- 60L Polyethylen Sammelbehälter mit Edelstahlwagen
- 105L Polyethylen Sammelbehälter mit Edelstahlwagen
- Edelstahlgitterkorbwagen für Müllsäcke
- Abzugshaube zum Anschluss an bauseitige Abluft
- Aktivkohlefilter
- Arbeitsfläche TRESPA



COMPANY WITH
 QUALITY SYSTEM
 CERTIFIED BY DNV GL
 = ISO 9001 =

COMPANY WITH
 ENVIRONMENTAL SYSTEM
 CERTIFIED BY DNV GL
 = ISO 14001 =

TECNIPLAST
 innovation through passion

HEADQUARTERS

ITALY | Tel. +39 0332 809711 · www.tecniplast.it · E-mail: tecnicom@tecniplast.it; venditeitalia@tecniplast.it

SISTER COMPANIES

AUSTRALIA/NEW ZEALAND | Tel. + 61 2 8845 6500 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplast.com.au

CHINA | Tel. + 86 (0)21 50810920 · www.tecniplast.cn · E-mail: tecniplastchina@tecniplast.it

FRANCE | Tel. +33 (0)4 72 52 94 41 · www.tecniplast.fr · E-mail: info@tecniplast.fr

GERMANY | Tel. +49 (0)8805 921320 · www.tecniplast.de · E-mail: info@tecniplast.de

UNITED KINGDOM | Tel. + 44 (0)345 0504556 · www.tecniplastuk.com · E-mail: info@tecniplastuk.com

JAPAN | Tel. +81 (0)3 5770 5375 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplastjapan.co.jp

SWITZERLAND | Tel +41 (0)81 750 31 40 · www.tecniplast.ch · Email: info@tecniplast.ch

USA | Toll Free: +1 877.669.2243 · www.tecniplastusa.com · E-mail: info@tecniplastusa.com

CANADA | Toll Free: +1 855.347.8718 · www.tecniplastcanada.com · E-mail: info@tecniplastcanada.com

CAT187/TED - Rev Nov2020

Technische Änderungen vorbehalten