

 **TECNIPLAST**



ARIA ISO-TECH60 N
BIOSAFETY CABINET



ARIA

ISO-TECH60 N

Sicherheitswerkbank der Klasse II für Hochsicherheitslabore

Höchste Sicherheit und Rückhaltevermögen

- **Zwei ECM-Gebläsemotoren** – ein **zusätzlicher Abluftmotor** im oberen Bereich sorgt für zuverlässige Rückhaltung, selbst bei Ausfall des Hauptgebläses.
- **Hermetisch verschließbare Frontscheibe** (optional mit **aufblasbarer Dichtung**) – verbessert die Sicherheit und erleichtert die H_2O_2 -Dekontamination im Kreislaufverfahren.

Maximale Leistung & Konformität

- **Luftreinheit gemäß ISO-Klasse 3 (nach ISO 14644-1)**
- **Luftführung gemäß EN 12469:2000 (Klasse II Sicherheitswerkbank)**
- **Entspricht NSF49 – Klasse II Typ A2 Sicherheitswerkbank**


Zentrale Merkmale & Vorteile

- **Automatic sliding front window** – mit zwei Betriebsmodi:
 - Biosicherheitsmodus (250 mm Frontöffnung)
 - Wechselmodus (330 mm Frontöffnung)
- **7" TFT-Farb-Touchscreen** – intuitive Benutzeroberfläche mit Echtzeit-Überwachung des Luftstroms
- **Energieeffiziente LED-Beleuchtung** – mit Weiß- und Rotlichtoption für Nachtbetrieb
- **ECM-Gebläsemotor mit automatischer Luftstromregelung** – sichert laminare Strömung und konstante Luftbarriere
- **TRESPA®-Arbeitsplatten** – langlebig, leicht zu reinigen und autoklavierbar für maximale Hygiene

Zusätzlicher Gebläsemotor




Manuelle Dekon-Schleuse

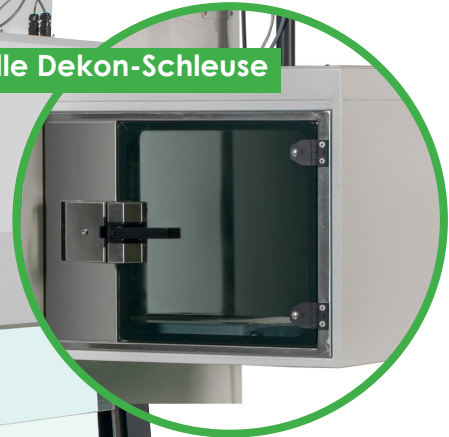

Optionale aufblasbare Dichtung



Automatisches Tauchbad

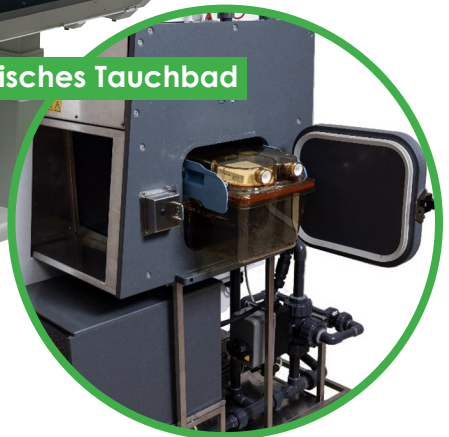

TECNIPLAST

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 14001 =

HEADQUARTERS

ITALY | Tel. +39 0332 809711 · www.tecniplast.it · E-mail: tecnicom@tecniplast.it; venditeitalia@tecniplast.it

SISTER COMPANIES

AUSTRALIA/NEW ZEALAND | Tel. + 61 2 8845 6500 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplast.com.au

CHINA | Tel. + 86 (0)21 50810920 · www.tecniplast.cn · E-mail: tecniplastchina@tecniplast.it

FRANCE | Tél. +33 (0)4 72 52 94 41 · www.tecniplast.fr · E-mail: info@tecniplast.fr

GERMANY | Tel. +49 (0)8805 921320 · www.tecniplast.de · E-mail: info@tecniplast.de

UNITED KINGDOM | Tel. + 44 (0)345 0504556 · www.tecniplastuk.com · E-mail: info@tecniplastuk.com

JAPAN | Tel. +81 (0)3 5770 5375 · www.tecniplast.jp · E-mail: info@tecniplastjapan.co.jp

SWITZERLAND | Tel. +41 (0)81 750 31 40 · www.tecniplast.ch · E-mail: info@tecniplast.ch

USA | Toll Free: +1 877.669.2243 · www.tecniplastusa.com · E-mail: info@tecniplastusa.com

CANADA | Toll Free: +1 855.347.8718 · www.tecniplastcanada.com · E-mail: info@tecniplastcanada.com