



**Classe II (Type A2):  
protection garantie  
pour votre personnel  
et vos animaux!**



## Hotte de change mobile de biosécurité Classe II conçue spécifiquement pour les applications **Germ-Free**

Hotte de biosécurité microbiologique de classe II spécialement conçue pour les laboratoires de recherche animale, ARIA ISO-TECH60 P garantit la protection de votre personnel et de vos animaux et **assure une barrière efficace, préservant l'état de santé des animaux sans germes et empêchant la contamination croisée** ainsi que l'**exposition aux allergènes et agents pathogènes potentiels**.

### PERFORMANCE

- **Manual Decon Lock** (option) sur un côté pour décontaminer manuellement la cage avant d'y entrer et de la manipuler ou **Automatic Dunk Tank** (option) avec portes verrouillées pour assurer la standardisation SOP avec des animaux sans germes et une bioprotection ou un bioconfinement avancé.
- **Qualité de l'air ISO Class 3 selon ISO 14644-1**, les performances aérauliques répondent aux exigences de la réglementation EN 12469:2000 et sont conformes à NSF49 en tant que Classe II Type A2
- **Degré de protection le plus élevé** : système de gants coulissants en option installé le long de l'ouverture avant afin de minimiser le risque d'erreur humaine et de contamination potentielle
- **Porte de transfert (option) avec ou sans bride** afin d'introduire en toute sécurité les animaux sans germes ou le matériel autoclavé.

### AVANTAGES

- **Large surface de travail** pour contenir tout le matériel nécessaire pour travailler avec des souris très sensibles
- **Ergonomie renforcée** : la hauteur d'ouverture améliorée et l'utilisation d'un système intelligent de gants coulissants rendent tout type de manipulation plus simple, plus efficace et plus sûre
- **Efficacité énergétique** : L'arres lumineuses à LED avec gradateur et ventilateur à moteur EC
- **Facile à nettoyer** : la zone de travail en AISI 316 avec panneaux de plan de travail amovibles en TRESPA® est très résistante lors des procédures de nettoyage de routine et/ou de stérilisation à l'autoclave
- **Configurable par le client** : différentes options disponibles selon les besoins de l'utilisateur.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Vitre frontale en verre sécurité articulée et inclinée** permettant une bonne visibilité du plan de travail et de l'intérieur des cages en réduisant l'éblouissement
- **Système de levage automatique électrique** (option) pour un positionnement ergonomique en hauteur et un transport facile
- **Écran tactile couleur TFT 7" intuitif** avec système de microprocesseur intégré pour un contrôle et une utilisation faciles
- **Barres lumineuses LED avec gradateur** (particulièrement avantageux pour les procédures avec des souris sensibles à la lumière) et lumière LED rouge pour travailler la nuit.

**DIMENSIONS TOTALES** (sans l'échappement) LxPxH  
avec Manual Decon Lock et porte de transfert avec bride)

2340 x 859 x 2007 - 2407 mm

avec Automatic Dunk tank et porte de transfert avec bride


2215 x 859 x 2007 - 2407 mm

**DIMENSIONS DE LA SURFACE DE TRAVAIL** (LxPxH)

1495 x 490 x environ 690 mm



MANUAL DECON LOCK (MDL)

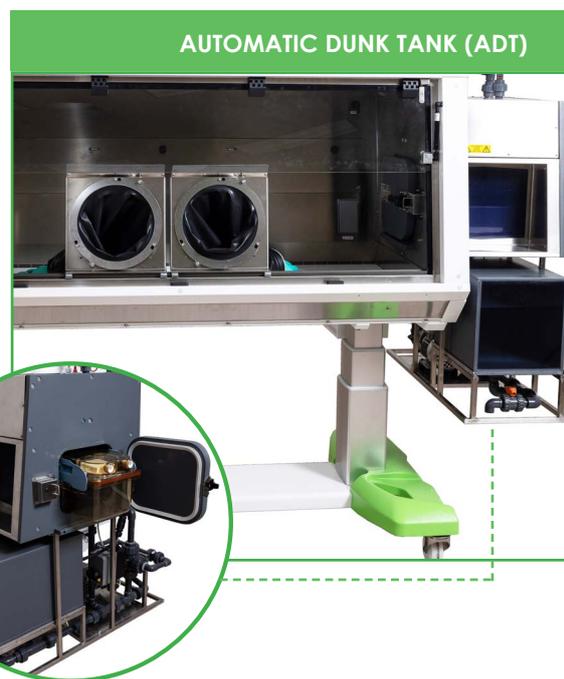

AUTOMATIC DUNK TANK (ADT)



COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =

COMPANY WITH  
ENVIRONMENTAL SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 14001 =

**TECNIPLAST**  
innovation through passion

#### HEADQUARTERS

ITALY | Tel. +39 0332 809711 · www.tecniplast.it · E-mail: tecnicom@tecniplast.it; venditeitalia@tecniplast.it

#### SISTER COMPANIES

AUSTRALIA/NEW ZEALAND | Tel. + 61 2 8845 6500 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplast.com.au

CHINA | Tel. + 86 (0)21 50810920 · www.tecniplast.cn · E-mail: tecniplastchina@tecniplast.it

FRANCE | Tel. +33 (0)4 72 52 94 41 · www.tecniplast.fr · E-mail: info@tecniplast.fr

GERMANY | Tel. +49 (0)8805 921320 · www.tecniplast.de · E-mail: info@tecniplast.de

UNITED KINGDOM | Tel. + 44 (0)345 0504556 · www.tecniplastuk.com · E-mail: info@tecniplastuk.com

JAPAN | Tel. +81 (0)3 5770 5375 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplastjapan.co.jp

SWITZERLAND | Tel. +41 (0)81 750 31 40 · www.tecniplast.ch · Email: info@tecniplast.ch

USA | Toll Free: +1 877.669.2243 · www.tecniplastusa.com · E-mail: info@tecniplastusa.com

CANADA | Toll Free: +1 855.347.8718 · www.tecniplastcanada.com · E-mail: info@tecniplastcanada.com

CAT 208/ING - Rev Dec.2022

Tecniplast reserves the right to change or modify product and/or specifications without notice or obligation.