

Hotte de vidage
de litière **mobile et**
compacte avec
larges ouvertures !

 **ARIA**
ALLERGEN CONTAINMENT



 **ARIA**

Hotte de vidange silencieuse et compacte **optimisant la sécurité et l'efficacité**

La hotte de vidange de litière Tecniplast DS One offre **la meilleure sécurité, ergonomie et efficacité énergétique de sa catégorie pour la protection du personnel et l'environnement de travail** contre les particules d'aérosol et les odeurs désagréables.

PERFORMANCE


- zone de travail repensée et optimisée ;
- garantie par les préfiltres (ISO Coarse 70% selon ISO 16890 ; G 4 selon EN779) serrés avec un filet co-moulé transparent pour une élimination plus facile et plus simple des particules de poussière plus grosses ;
- permettant à l'opérateur de simplifier le retrait des sacs poubelles sous une protection constante et incomparable de l'opérateur.

grâce à une



AVANTAGES

- **Spacious working area in a compact and ergonomic design** thanks to its unmatched access opening height. An optional electric lifting system is also available to be adjusted for user convenience;
- **Easiest Cleanability** thanks to the working surface made in high tech, highly resistant plastic making it highly cleanable and with a high resistance to chemical disinfectants;
- **Energy-efficient and Acoustic Comfort** owed to the unique plenum design and EC motor;
- **Increased durability** of the working surface. The elastic property of the plastic (polymer) is extremely durable and resistant to chemical disinfectants;
- **Top-mounted exhaust carbon filter** absorbs odours and gaseous contaminants including ammonia.

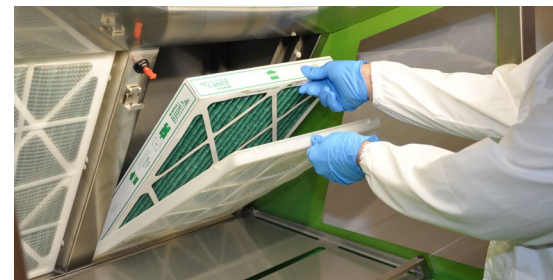

CARACTERISTIQUES STANDARDS

- **AISI 304 with scotch brite finishing** for enhanced cleaning and product life;
- **4.3" touch screen control panel** with automatic regulation system to keep the inflow air speed constant;
- **LED light Bar with light dimmer** provide the highest lighting level;
- **EC Motor Blower** ensures higher efficiency & performance, extended life and reduced maintenance.

DIMENSIONS (LxPxH)

avec support de pied fixe :

mm 1050 x 895 x 1880

avec élévateur:

mm 1050 x 895 x 1880

DIMENSIONS DE LA SURFACE DE TRAVAIL (LxPxH)

mm 966 x 660 x 590

Wide range of options and accessories:

- 60L Polyethylene bin with S/S trolley
- 105L Polyethylene bin with S/S trolley
- Stainless steel waste bag trolley
- Thimble duct exhaust transition
- Exhaust carbon filter
- Trespa shelf



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 14001 =

TECNIPLAST
innovation through passion

HEADQUARTERS

ITALY | Tel. +39 0332 809711 · www.tecniplast.it · E-mail: tecnicom@tecniplast.it; venditeitalia@tecniplast.it

SISTER COMPANIES

AUSTRALIA/NEW ZEALAND | Tel. + 61 2 8845 6500 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplast.com.au

CHINA | Tel. + 86 (0)21 50810920 · www.tecniplast.cn · E-mail: tecniplastchina@tecniplast.it

FRANCE | Tel. +33 (0)4 72 52 94 41 · www.tecniplast.fr · E-mail: info@tecniplast.fr

GERMANY | Tel. +49 (0)8805 921320 · www.tecniplast.de · E-mail: info@tecniplast.de

UNITED KINGDOM | Tel. + 44 (0)345 0504556 · www.tecniplastuk.com · E-mail: info@tecniplastuk.com

JAPAN | Tel. +81 (0)3 5770 5375 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplastjapan.co.jp

SWITZERLAND | Tel +41 (0)81 750 31 40 · www.tecniplast.ch · Email: info@tecniplast.ch

USA | Toll Free: +1 877.669.2243 · www.tecniplastusa.com · E-mail: info@tecniplastusa.com

CANADA | Toll Free: +1 855.347.8718 · www.tecniplastcanada.com · E-mail: info@tecniplastcanada.com

CAT187/ING - Rev Apr2020

Tecniplast reserves the right to change or modify product and/or specifications without notice or obligation.